



**uniss**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI



# Piano Lauree Scientifiche in Biologia e Biotecnologie

## Dosaggio delle proteine mediante spettrofotometria

### Docenti:

Prof.ssa Marilena Formato, [formato@uniss.it](mailto:formato@uniss.it)

Dr. Antonio J. Lepedda, [ajlepedda@uniss.it](mailto:ajlepedda@uniss.it)

Dr. Gabriele Nieddu, [ganiemdu@uniss.it](mailto:ganiemdu@uniss.it)

Dipartimento di Scienze Biomediche

**Referente Progetto PLS-Sassari:** Prof. Marilena Formato

Dipartimento di Scienze Biomediche

E-mail: [formato@uniss.it](mailto:formato@uniss.it)

## Estrazione di proteine da tessuti

Dopo l'acqua, le proteine sono le sostanze più abbondanti nelle cellule e sono coinvolte nella maggior parte dei processi biologici che si svolgono in esse.

Nell'organismo umano si trovano più di 100000 tipi di proteine diverse. Grazie alla loro varietà, le proteine svolgono molte funzioni, tra cui:


- facilitano le reazioni chimiche che avvengono nelle cellule (ruolo di enzimi),
- regolano l'entrata e l'uscita di alcune sostanze dalle cellule (proteine di membrana),
- servono come sostegno e sono coinvolte nel movimento cellulare (proteine strutturali).

Alcune proteine formano strutture visibili a occhio nudo, come le ragnatele e i capelli. Le macromolecole proteiche sono polimeri lineari di amminoacidi.

La prima tappa nell'isolamento delle proteine prevede l'estrazione dalla cellula. Tale processo avviene mediante un'omogeneizzazione che distrugge il tessuto e rilascia i componenti intracellulari in sospensione.

L'omogeneizzazione viene anche usata come fase preliminare per la purificazione parziale di organuli cellulari per gli studi sulla compartimentazione metabolica. Per il successo della omogeneizzazione sono molto importanti:

- la scelta del tessuto di partenza
- le proprietà fisiche e chimiche della soluzione fisiologica adoperata
- il metodo impiegato per la distruzione delle cellule

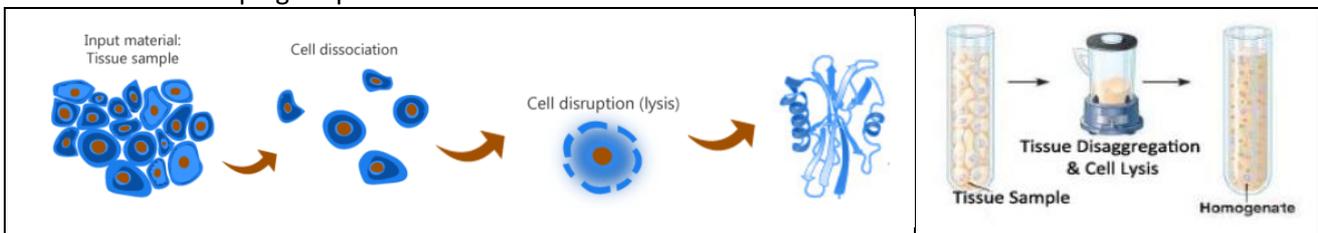



Le procedure di omogeneizzazione per la purificazione delle proteine implicano necessariamente una fase di distruzione cellulare con metodi che possono essere meccanici, chimici ed enzimatici. La scelta del metodo dipende dalla natura della parete/membrana cellulare.

Il contenuto proteico può successivamente essere quantificato utilizzando metodi colorimetrici come il dosaggio mediante saggio Bradford, e le proteine successivamente purificate mediante procedure di frazionamento basate sulle proprietà chimico-fisiche della proteina di interesse. Pur perdendo in parte la proteina desiderata si mira ad eliminare in maniera selettiva le altre componenti dalla miscela.

Caratteristica della proteina	Procedura di purificazione
Solubilità	Salting out
Carica ionica	Cromatografia a scambio ionico Elettroforesi Focalizzazione isoelettrica
Polarità	Cromatografia idrofobica
Dimensioni	Cromatografia per filtrazione su gel SDS-PAGE Ultracentrifugazione
Specificità di legame	Cromatografia per affinità



## Quantificazione di proteine.

Reagenti specifici vengono incubati con quantità NOTE di una proteina standard (es. Albumina da siero bovina- BSA) e si ottiene una retta di calibrazione. Poi si fa reagire con lo stesso colorante un volume noto di miscela di proteine e si relaziona l'assorbanza con la quantità sulla retta di calibrazione.

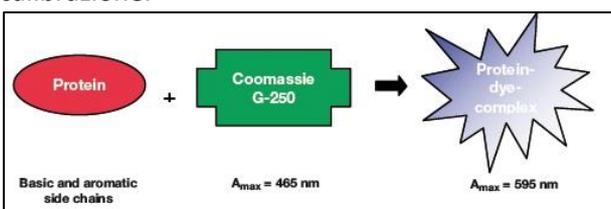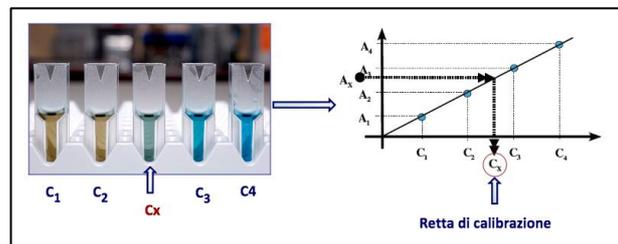

Dosaggio mediante Metodo di Bradford (legame con coloranti). Il legame del colorante Coomassie Brilliant Blue G-250 alle proteine (mediante formazione di complessi non covalenti con gli amminoacidi basici) provoca uno spostamento del massimo di assorbimento del colorante da 465nm (rosso) a 595 nm (blu) in soluzioni acide (50% acido fosforico).

## Spettrofotometria

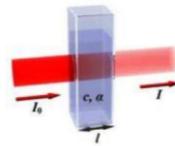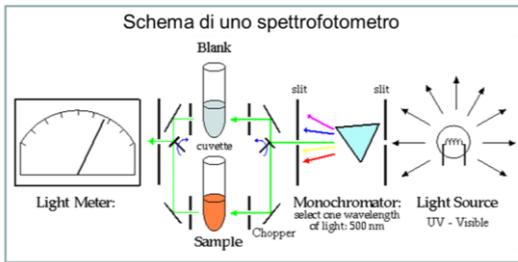

### Legge di Lambert-Beer

$$A = \epsilon_{\lambda} C l$$

$C$  = concentrazione dell'analita (moli/L)

$l$  = cammino ottico (cm)

$\epsilon_{\lambda}$  = coefficiente di estinzione molare ( $M^{-1} \text{ cm}^{-1}$ )

$\epsilon_{\lambda}$  dipende da:

- lunghezza d'onda della radiazione assorbita
- natura del solvente
- pH della soluzione
- specie chimica che assorbe

**È indipendente dalla temperatura!!!**

$T$  (trasmittanza) =  $I/I_0$


$I_0$  = intensità della luce incidente  
 $I$  = intensità della luce trasmessa

$A$  (assorbanza) =  $\log 1/T$



L'assorbanza esprime la quantità di luce assorbita da una sostanza (è adimensionale)

## Lo spettro elettromagnetico

I vari intervalli dello spettro elettromagnetico sono sfruttati a scopo analitico per ottenere informazioni strutturali quali-quantitative sulla materia analizzata

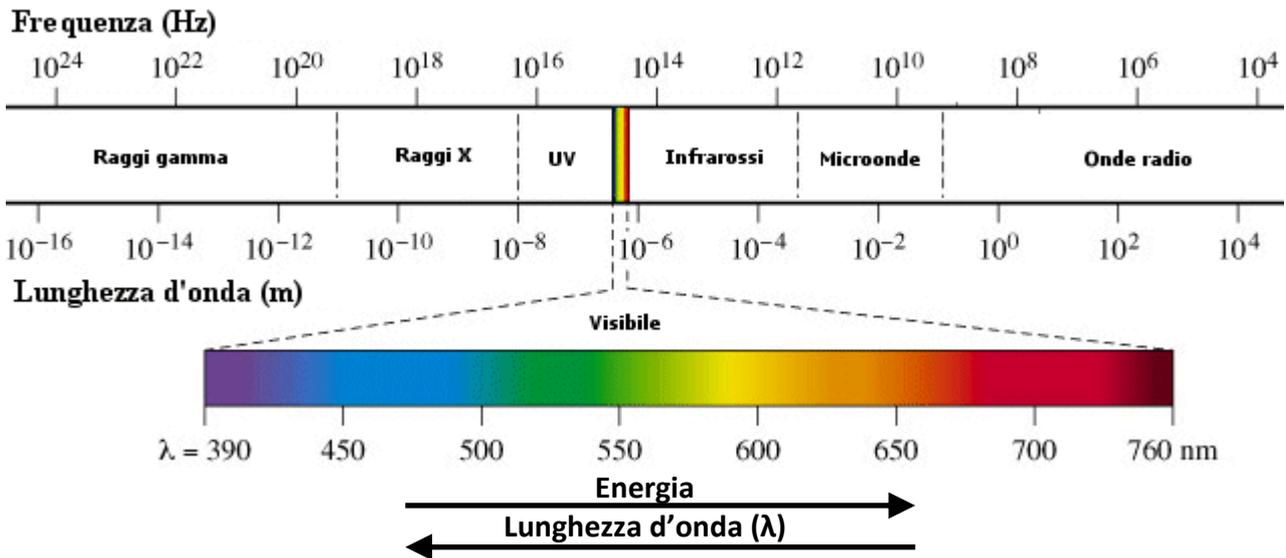

## Spettri di Assorbimento

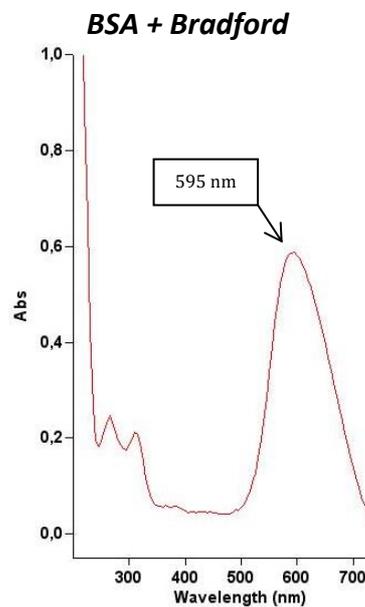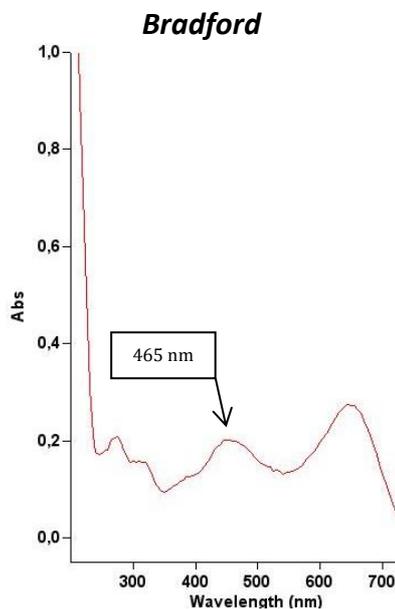

## PROTOCOLLO SPERIMENTALE

### Dosaggio delle proteine con il metodo Bradford

#### Preparazione soluzioni standard

Per la costruzione della retta di taratura preparare 5 soluzioni a concentrazione nota della proteina standard diluendo opportunamente una "soluzione stock" (2 mg/ml). Volume finale della soluzione diluita 20  $\mu\text{L}$ .

STANDARD	$\mu\text{L}$ soluzione BSA Stock (2 mg/ml)	$\mu\text{L}$ H <sub>2</sub> O	$\mu\text{L}$ reattivo di Bradford
Bianco reagent			1000
0,2 mg/ml			1000
0,4 mg/ml			1000
0,6 mg/ml			1000
0,8 mg/ml			1000
1 mg/ml			1000
Campione X <sub>1</sub>			1000
Campione X <sub>2</sub>			1000
Campione X <sub>3</sub>			1000

- Agitare su vortex e trasferire il contenuto in cuvette di plastica.
- Effettuare le letture di assorbanza allo spettrofotometro alla lunghezza d'onda di 595 nm dopo 5 min di incubazione con il reattivo (il colore blu è stabile per circa 45 min).
- Leggere prima l'assorbanza del bianco (BR), quindi azzerare lo spettrofotometro e procedere con le letture di standard e campioni incogniti.
- Per il calcolo della concentrazione proteica utilizzare la retta di taratura ottenuta mettendo in relazione le misure di assorbanza e le concentrazioni della proteina standard.

#### Riportare in tabella le letture di assorbanza ottenute

STANDARD	Assorbanza (595 nm)	
0,2 mg/ml		
0,4 mg/ml		
0,6 mg/ml		
0,8 mg/ml		
1 mg/ml		
Campione X <sub>1</sub>		
Campione X <sub>2</sub>		
Campione X <sub>3</sub>		


#### Riportare in grafico i valori ottenuti per gli standard

#### Costruire la retta di taratura

#### Calcolare le concentrazioni dei campioni X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>

# Assorbanza

Concentrazione (mg/ml)

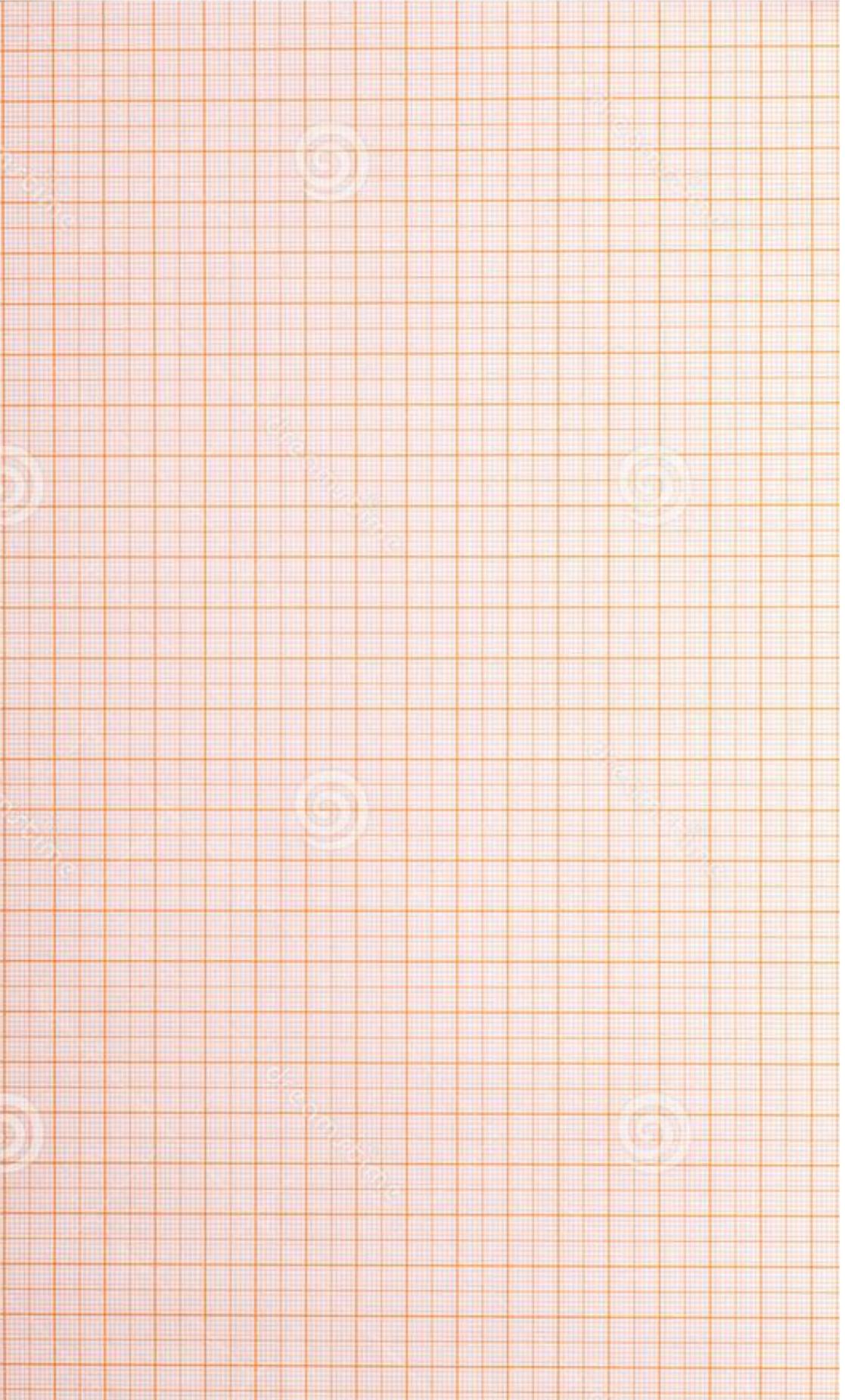

## **Norme generali di sicurezza in laboratorio**

*Qui di seguito sono elencate alcune norme elementari di sicurezza, che devono essere tassativamente rispettate.*

- Entrando in laboratorio, individuare le vie di fuga, indicate dalla segnaletica verde.
- In laboratorio indossare sempre il camice. Il camice deve essere chiuso sul davanti, con maniche lunghe e polsini ad elastico. Al termine delle attività, prima di lasciare il laboratorio, togliersi il camice. In ogni caso, non uscire dal laboratorio, per recarsi in altre aree (biblioteca, uffici, bar, ecc.), senza aver prima tolto il camice.
- Non introdurre in laboratorio borse, zaini o altro materiale non necessario.
- Indossare guanti monouso durante la manipolazione di sangue o di materiale da esso derivato non fissato. I guanti devono essere rimossi con attenzione e sostituiti quando sono visibilmente contaminati. I guanti si sfilano rovesciandoli e vanno gettati negli appositi contenitori.
- Gli studenti che presentano dermatiti o altre lesioni sulle mani, devono indossare guanti protettivi in tutte le fasi di lavoro.
- I guanti vanno tolti, quando si usino strumenti di qualsiasi natura (telefono, tastiera, strumenti scientifici, maniglie, ecc.). I guanti usati non vanno riutilizzati.
- Lavare le mani routinariamente, immediatamente dopo la manipolazione di materiali contaminati e, in ogni caso, dopo la fine delle attività, anche quando sono stati indossati i guanti. Lavare sempre le mani prima di lasciare il laboratorio.
- In laboratorio è vietato mangiare, bere, fumare, portare oggetti alla bocca ed applicare cosmetici.
- Non pipettare mai con la bocca, ma utilizzare le apposite pipette.
- Non appoggiare recipienti contenenti liquidi biologici vicino al bordo del banco di lavoro.
- Tutto il materiale biologico di origine umana (sangue, ecc.) deve essere considerato come potenzialmente infetto e pertanto trattato con le necessarie precauzioni.
- Segnalare immediatamente al personale docente ogni spargimento di materiale biologico (ad es. schizzi di sangue) sul piano di lavoro, affinché si provveda alla decontaminazione con un germicida chimico appropriato (candeggina, ecc.).
- Decontaminare e pulire sempre, al termine del loro utilizzo, le apparecchiature scientifiche e, al termine della attività, i piani di lavoro.
- Seguire scrupolosamente le indicazioni di sicurezza riportate nei protocolli di esperimento.
- Raccogliere tutti i liquidi biologici (sangue, terreni di coltura venuti a contatto con le cellule, cellule, ecc.) in speciali contenitori per rifiuti, che verranno successivamente eliminati previo trattamento con candeggina al 15%.
- Mettere il materiale monouso (pipette, fiasche ecc.) venuto a contatto con materiale biologico in un sacco apposito, che verrà smaltito mediante incenerimento.
- Stante i costi elevati dello smaltimento, ridurre il più possibile l'uso del materiale monouso.
- Segnalare immediatamente al personale docente qualsiasi incidente o la mancanza di materiale di protezione

### **Utilizzo della centrifuga**

- chiudere accuratamente il tappo delle provette, per evitare la fuoriuscita di liquido e la formazione di aerosol
- assicurarsi che il rotore sia bilanciato: provette di ugual peso devono essere inserite negli alloggiamenti diametralmente opposti
- chiudere il coperchio della centrifuga prima di avviarla
- non cercare di aprire il coperchio prima del completo arresto del rotore
- in caso di fuoriuscita di liquido dalle provette, avvertire il personale docente

### **Utilizzo dell'apparecchiatura per elettroforesi**

- assicurarsi che l'alimentatore sia spento, prima di collegare i morsetti
- assicurarsi che il coperchio della vaschetta sia correttamente posizionato, prima di collegare i morsetti
- alla fine della corsa, prima di rimuovere il coperchio della cella elettroforetica, spegnere l'alimentatore e staccare i morsetti